


FREEPRINT®

3D PRINTING MATERIAL

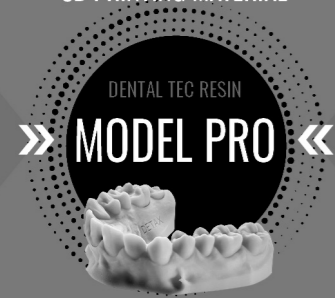

MODELS

DETAX**DEUTSCH****FREEPRINT® MODEL PRO**

Lichthärtender Kunststoff auf (Meth)acrylatbasis, zur generativen Herstellung von Dentalmodellen für DLP-Drucker mit UV-LED 385 nm

Anwendungsbereich

3D Print Arbeits- und Präsentationsmodelle für das komplette Modellspektrum der Zahntechnik

Geeignet für folgende DLP-Drucker/Reinigung/Nachbelichtung

siehe "Annex 1" (separat beiliegend)

Verarbeitung

- ▶ Die Eigenschaften des Endproduktes sind u.a. vom Nachbearbeitungsprozess abhängig. Die richtige Nachbelichtung ist für optimale Eigenschaften wichtig. Daher muss sichergestellt sein, dass sich das Belichtungsgerät in ordnungsgemäßem Zustand befindet und die Objekte vollständig durchgehärtet sind (Prozessbeschreibung beachten).
- ▶ Vor Benutzung das Material intensiv schütteln und mit einem Flaschenroller homogenisieren.
- ▶ Verarbeitungstemperatur 23 °C ± 2 °C.

Sicherheitshinweise

- ▶ Nur für den angegebenen Anwendungsbereich durch geschultes Fachpersonal.
- ▶ Produkt enthält (Meth)acrylate und Phosphinoxide. Die Inhaltsstoffe von **FREEPRINT® MODEL PRO** können bei entsprechend disponierten Personen allergische Reaktionen hervorrufen. In einem derartigen Fall ist von einer weiteren Anwendung des Produktes abzusehen.
- ▶ Direkten Kontakt mit dem flüssigen Material und den Bauteilen vor der Nachhärtung vermeiden. Reizt die Atemwege, Augen und die Haut (Sensibilisierung möglich).
- ▶ Beim Bearbeiten des unabgebundenen Materials persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.
- ▶ Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- ▶ Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- ▶ Die Verarbeitungshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten.
- ▶ Gefahren- und Sicherheitshinweise aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Hinweise

- ▶ DETAX haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung hervorgerufen werden.
- ▶ Behälter immer dicht verschlossen halten, nach jedem Gebrauch sofort sorgfältig verschließen.
- ▶ Produkt kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Lagerung

- ▶ **FREEPRINT® MODEL PRO** trocken (bei 15 °C - 28 °C) und lichtgeschützt lagern. Bereits eine geringe Lichteinwirkung kann die Polymerisation auslösen.
- ▶ Zum Schutz vor Verunreinigungen, das Material in der Wanne mit dem Deckel oder einer Glasplatte abdecken.

Entsorgung

Die Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen und internationalen Vorschriften durchführen.

Herstellungsprozess

Datenaufbereitung und Erzeugung der Supportstruktur nach Angaben der CAD-Software Hersteller

Bauprozess

Erzeugung eines Print Jobs unter Einhaltung der Maschinen- und Materialparameter

Nachbearbeitungsprozess

Nach dem Hochfahren der Plattform wird eine Abtropfzeit von ca. 10 Minuten empfohlen. Die Nachbearbeitung sollte möglichst unmittelbar nach dem Bauprozess erfolgen.

Reinigung

siehe „Annex 1, CLEANING EQUIPMENT“

Nachbelichtung

siehe „Annex 1, CURING LIGHT EQUIPMENT“

Lagerung:



Verarbeitung:

Bei 23 °C ± 2 °C

ENGLISH**FREEPRINT® MODEL PRO**

Light-curing resin based on (meth)acrylate, for the generative fabrication of dental models for DLP printers with UV-LED 385 nm

Area of application

3D Print working and presentation models for the entire spectrum of models in dentistry

SUITABLE FOR THE FOLLOWING DLP PRINTERS/CLEANING/POST-EXPOSURE

see "Annex 1" (enclosed separately)

Processing

- ▶ The properties of the final product depend, among other things, on post-processing. Therefore it must be ensured that the light unit is in an orderly condition and that the models are completely cured (refer to the process description).
- ▶ Shake the material intensively before use and homogenise with a bottle roller.
- ▶ Processing temperature 23 °C ± 2 °C.

Safety Information

- ▶ Only to be used by trained specialists for the specified area of application.
- ▶ Product contains (meth)acrylates and phosphine oxides. The ingredients of **FREEPRINT® MODEL PRO** may cause allergic reactions in accordingly disposed persons. In such a case, do not use the product any further.
- ▶ Avoid direct contact with the liquid material and the components before post-curing. Irritating to airways, eyes and skin (sensitization possible).
- ▶ Wear personal protective equipment (protective gloves, goggles) when handling the uncured material.
- ▶ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
- ▶ In case of contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.
- ▶ The processing instructions and precautionary measures must be observed.
- ▶ Refer to the relevant safety data sheet for hazard and safety information.

Notes

- ▶ DETAX does not accept liability for any damage caused by misuse.
- ▶ Always keep container tightly closed, carefully close immediately after each use.
- ▶ Product may cause allergic reactions.
- ▶ Read and understand the safety data sheet!

Storage

- ▶ **FREEPRINT® MODEL PRO** is to be stored dry (at 15 °C - 28 °C) and protected from light. Minimal influence of light can already induce polymerisation.
- ▶ To protect against contamination, cover the material in the tray with the lid or a glass plate.

Disposal

Disposal of the contents/container must be carried out in accordance with the local/regional/national and international regulations.

Manufacturing process

Data preparation and fabrication of the support structure according to the instructions of the CAD software manufacturer

Construction process

Generation of a Print Job complying with machine and material parameters

Post-processing

After raising the platform, a drip time of approx. 10 minutes is recommended. If possible, post-processing should commence immediately following the construction process.

Cleaning

see "Annex 1, CLEANING EQUIPMENT"

Post-exposure

see "Annex 1, CURING LIGHT EQUIPMENT"

Storage:



Processing:

at 23 °C ± 2 °C

Ordering information:**FREEPRINT® MODEL PRO 385**

sand	
1.000 g	04439
5 kg Eco Bag	02579

light-grey	
1.000 g	02546
5 kg Eco Bag	02558

grey	
1.000 g	04438
5 kg Eco Bag	02574

caramel	
1.000 g	04440
5kg Eco Bag	02585

FREEPRINT® MODEL 385

sand	
1.000 g	03778
3 kg Eco Bag	04333
5 kg Eco Bag	04321

ivory	
1.000 g	03780

grey	
1.000 g	03782

caramel	
1.000 g	02935

FREEPRINT® MODEL 2.0 385

sand	
1.000 g	02128
3 kg Eco Bag	04331
5 kg Eco Bag	04117

light-grey	
1.000 g	02099
3 kg Eco Bag	04330
5 kg Eco Bag	04107

grey	
1000 g	02177
3 kg Eco Bag	04329
5 kg Eco Bag	04106

caramel	
500 g	02844
1.000 g	02850
3 kg Eco Bag	04328
5 kg Eco Bag	04015

white	
1.000 g	02148
3 kg Eco Bag	04332
5 kg Eco Bag	04118

FREEPRINT® MODEL T 385

blue	
1.000 g	02332
3 kg Eco Bag	04334
5 kg Eco Bag	04322

FREEPRINT® GINGIVA 385

500 g	02820
1.000 g	02843



DE Gebrauchsanweisung**EN** Instructions for use**DETAX**

DETAX GmbH
 Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
 ☎ +49 7243/510-0 · 📠 +49 7243/510-100
 www.detax.com · post@detax.com

Made in
 Germany
 02/2024
 4

Annex 1

DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) PRINTER, OPERATION SOFTWARE AND PARAMETER

Printer Manufacturer, Model	Light source	Light intensity	Operation Software	Parameter data set*
Asiga Max 	385 nm	7.0 mW/cm ²	Composer 1.2.11	Detax_Freeprint model pro COLOR_5
Asiga PRO 4K 	385 nm	7.0 mW/cm ²	Composer 1.2.11	Detax_Freeprint model pro COLOR_5

*The set of parameters includes all relevant material- and printer specific information. The placeholder **COLOR** shall be replaced by **caramel**, **grey**, **light grey** or **sand**

CLEANING EQUIPMENT

Cleaning unit Manufacturer, Model	Cleaning process
Ultrasonic bath Bandelin Sonorex	Clean the parts with isopropyl alcohol (purity \geq 98 %) for 3 minutes. Then thoroughly clean the openings, cavities and gap areas with compressed air. The main cleaning is performed in a separate vessel with fresh isopropyl alcohol (purity \geq 98 %) for 3 minutes. Prior to post-exposure, check the openings, cavities and gap areas for residues. Then blow off with compressed air.

LIGHT CURING EQUIPMENT

Light Curing unit Manufacturer, Model	Curing process
NK Optik Otofash G171	2 x 2000 flashes under inert gas, turnaround components after 2000 flashes
NK Optik Otofash 250/500	4000 flashes under inert gas @15 Hz



DETAX

DETAX GmbH

Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany

+49 7243/510-0 · +49 7243/510-100

www.detax.com · post@detax.com

Made in
Germany

01/2024

4